



# VETO CHIRURGICAL



Matériel à usage  
vétérinaire & chirurgical



**DEPUIS 2007**

[WWW.VETOCHIRURGICAL.COM](http://WWW.VETOCHIRURGICAL.COM)



# KAYCEE VETERINARY PRODUCTS

Avec 60 ans d'expérience dans la fabrication de seringues vétérinaires, Kaycee reste le choix privilégié à l'échelle mondiale pour l'industrie internationale de la santé animale.

Fabriquée au Royaume-Uni, Kaycee propose une gamme de seringues doseuses de haute qualité destinées à l'industrie internationale de la santé animale.

Conçus pour être compatibles avec tous les vaccins à base d'huile ou d'eau, chaque dispositif est calibré numériquement afin de garantir une précision fiable du dosage.

*Veto Chirurgical représentant officiel de la marque Kaycee  
en Afrique du Nord*



# NOTRE GAMME DE PRODUITS

## AVICULTURE

Une gamme de seringues adaptées à toutes les espèces de volailles. Disponibles en version à dose fixe ou à dose variable.



### L'OBJECTIF DE LA CONCEPTION

Une conception ergonomique et bien équilibrée permet de longues sessions tout en minimisant la fatigue de l'opérateur. Les composants chromés garantissent une longue durée de vie et une protection contre les contraintes d'une utilisation en extérieur dans les secteurs de l'agriculture et de l'aquaculture.



*Kaycee*

# OVIJECTOR

## PISTOLET DE VACCINATION

Dose ajustable MK1 0,1 - 1 ml

MK2 0,2 - 2 ml



Conçu pour une prise en main facile permettant une utilisation confortable, à long terme et répétée.

Compatible avec tous les vaccins à base d'huile et d'eau.

Les doses vont de 0,1 ml à 1,0 ml / 2,0 ml.  
Le sélecteur de dose situé à la base de la poignée permet un réglage précis de la dose par une simple rotation.



Alimentation par tube



Entretien facile, service après-vente et pièces de rechange disponibles.






Kaycee

# OVIJECTOR

## PISTOLET DE VACCINATION

Dose ajustable MK1 0,1 - 1 ml

MK2 0,2 - 2 ml

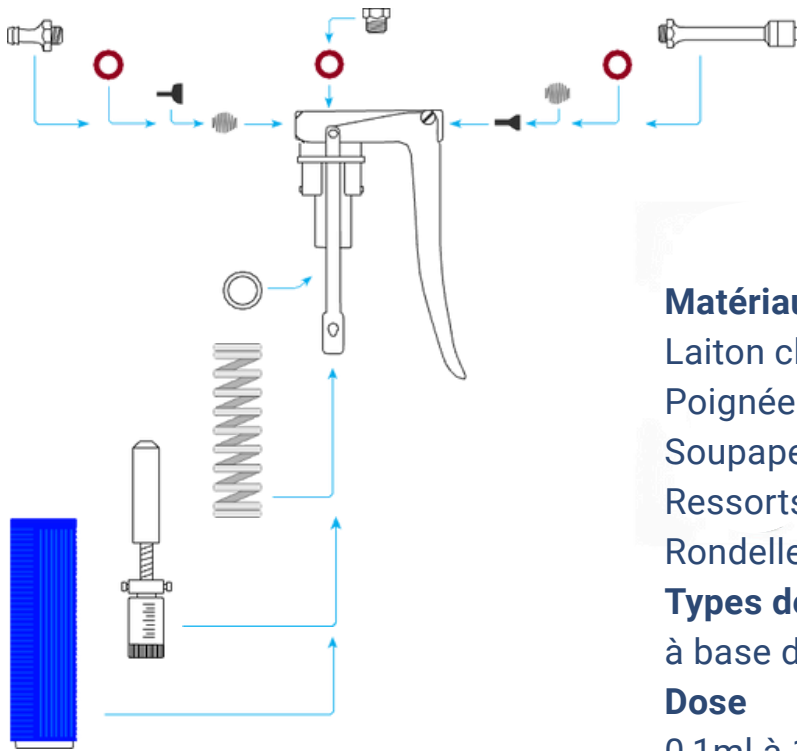

### Matériau

Laiton chromé

Poignée en PVC et aluminium

Soupapes en caoutchouc à joint torique en silicone

Ressorts en acier inoxydable

Rondelles en fibre

### Types de vaccins

à base d'huile et d'eau

### Dose

0,1ml à 1,0ml par pas de 0,1ml (Mk1)

0.5ml à 2.0ml par pas de 0.25ml (Mk2)

### Approvisionnement


Alimentation par tube à vis

### Poids net

0.5kg

### Pays de fabrication

Royaume-Uni

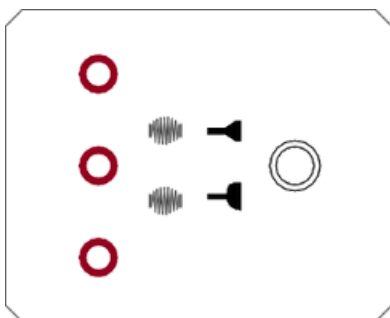

Contenu du kit de pièces de rechange





*Kaycee*

# MINIJECTOR

## PISTOLET DE VACCINATION

0,2 ml Dose fixe



Permet une injection précise et est compatible avec tous les vaccins à base d'huile et d'eau. Livré avec un flacon en plastique de 125 ml monté sur le dessus de la seringue (facilement adaptable à un tube d'alimentation en PVC).

Dose fixe de 0,2 ml



Bouteille filetée en pvc



Entretien facile, service après-vente et pièces de rechange disponibles.





# MINIJECTOR

## PISTOLET DE VACCINATION

**0,2 ml Dose f**

**Matériau**  
 Poignée en laiton chromé  
 Soupapes en caoutchouc  
 Ressorts en acier inoxydable  
 Rondelles en fibre

**Types de vaccins**  
 Tous les vaccins à base

**Dose**  
 Dose fixe de 0,2 ml

Poignée en laiton chromé, PVC et aluminium  
Soupapes en caoutchouc à joint torique en silicone  
Ressorts en acier inoxydable  
Rondelles en fibre

## Tous les vaccins à base d'huile et d'eau

Dose fixe de 0,2 ml

## Montage sur bouteille PVC

0,5kg

Royaume-Uni

# CONTACTEZ NOUS



## Veto Chirurgical

**Adresse** : Cité Essaada, en face de  
l'école nationale de médecine  
vétérinaire,  
2020 Sidi Thabet, Ariana, Tunisie

**Tel** : (+216) 71 552 064

**Email** : [contact@veto-chirurgical.com](mailto:contact@veto-chirurgical.com)

**Site web** : [www.veto-chirurgical.com](http://www.veto-chirurgical.com)